



Cergo compact  
Cergo press

Печи для обжига керамики

**DeguDent**  
*A Dentsply International Company*

# Эстетичные протезы, изготавливаемые с помощью системы: обжиг стоматологических керамических масс в печах Cergo® compact и Cergo® press.



## Cergo compact

- воспроизводимые результаты обжига в любых температурных диапазонах
- абсолютный контроль температуры
- никаких отклонений от конечной температуры
- 100 программных ячеек
- из них 24 программные ячейки для низкотемпературной керамики

Cergo compact отличается чрезвычайно точной, регулируемой с помощью микропроцессора температурной кривой, которая несмотря на возможную скорость подъема температуры 140°С/мин. не обнаруживает никаких отклонений от конечной температуры. Уникальное удобство в обслуживании и компактный дизайн делают эту печь прекрасным выбором для Вашей лаборатории.

**Использование карты памяти в качестве дополнительного носителя данных позволяет в любой момент расширять количество используемых программ и загрузить в любой момент необходимую программу обжига.**

Защитное устройство при необходимости позволяет сохранить все программы, которые после изменения вновь возвращаются к исходному программированию.



## Cergo press

- воспроизводимые результаты обжига и прессования в любых температурных диапазонах
- для муфелей любых размеров
- 8 предварительно заданных программ прессования
- абсолютный контроль температуры и при длительном обжиге


**Помимо базовых технических преимуществ Cergo compact печь Cergo press, являясь комбинированным вариантом печи, используется как для обжига, так и для прессования керамики.**

Эта многофункциональность делает Cergo press экономичным партнером в Вашей лаборатории. Благодаря отличному согласованию точно распределенной в камере для обжига температуры, полностью варибельного времени выдержки и соответствующего давления печь является совместимой со всеми известными прессуемыми керамическими массами и гарантирует оптимальные результаты.

# Использова

## Шаг за шагом:

простое управление. Отличные результаты.

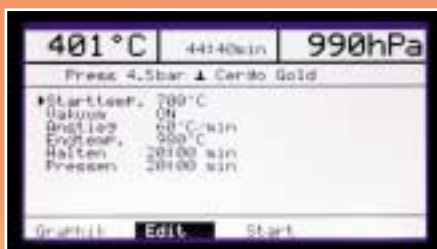

### Простое управление и программирование

- надежное, понятное управление
- графический дисплей
- все параметры выбираются свободно
- все параметры во время работы можно изменять
- многоязычный дисплей (5 языков)

### Восхититесь легким и быстрым управлением печами Cerigo:

С помощью поворотной установочной кнопки Вы можете без труда и точно попасть в меню и в любой момент запросить желаемую информацию – будь то в текстовом или графическом изображении. Удобное и гибкое управление стандартными программами и Вашими индивидуальными программами станет по-детски просто.



### Часть единого целого

#### Прессование и облицовка – с помощью системных компонентов!

Цельнокерамическая система Cerigo® и Cerigo® Kiss предлагает Вам максимум эстетики и надежности.

Более подробную информацию о принадлежностях системы Cerigo, таких как система муфелей и паковочные массы для керамики Cerigo® fit и Cerigo® fit Speed Вы найдете в соответствующих каталогах и брошюрах.

# ТЬ синергетические эффекты.

**Печи для обжига керамики Cerigo compact и Cerigo press идеально подходят для керамических масс для прессования и облицовки производства компании DeguDent.**

Точное выполнение обжига гарантирует лучшие результаты, как для низкотемпературных керамических масс, например **Duceragold® Kiss**, так и высокотемпературных масс, например, **Duceram® Kiss**.

Керамические массы для облицовки оксида циркония, например, **Cercon® ceram kiss**, также прекрасно обжигаются в печах Cerigo.

# Технические характеристики и данные для печей Cerigo compact и Cerigo press.

## Cerigo compact, артикул 5555 0001

Форма поставки: 1 печь для керамики вкл.: 1 сетевой кабель,  
1 изоляция для двери, 1 пинцет (высококачественная сталь),  
по 1 соединительному шлангу для вакуумного насоса,  
1 карта-ключ, 1 карта памяти, 1 трегер со штифтами

### Технические характеристики

Максимальная скорость подъема температуры	140 °С/мин.
Максимальная температура обжига	1200 °С
Сетевое напряжение	200 – 240 В
Максимальная потребляемая мощность	1300 Вт
Необходимый предохранитель	10 А
Температура окружающей среды	4 °С – 40 °С
Вес	около 28 кг
Габариты (высота-ширина-глубина)	400 x 345 x 520 мм

## Cerigo press, артикул 5556 0001

Форма поставки: 1 печь для керамики вкл.: 1 сетевой кабель,  
1 изоляция для двери, 1 пинцет (высококачественная сталь),  
1 цанга для муфеля, по 1 соединительному шлангу для вакуумного  
насоса и сжатого воздуха, 1 карта-ключ, 1 карта памяти,  
1 трегер со штифтами, 2 пресс-штемпеля

### Технические характеристики

Максимальная скорость подъема температуры	140 °С/мин.
Максимальная температура обжига	1200 °С
Сетевое напряжение	200 – 240 В
Максимальная потребляемая мощность	1300 Вт
Необходимый предохранитель	10 А
Температура окружающей среды	4 °С – 40 °С
Вес	около 30 кг
Габариты (высота-ширина-глубина)	475 x 345 x 520 мм

## Принадлежности для Cerigo compact и Cerigo press:



## Cerigo° vac, безмасляный вакуумный насос

### Технические характеристики

Питающее напряжение:	см. фирменную табличку
Максимальная потребляемая мощность:	130 Вт
Конечный вакуум:	около 20 мбар
Вес:	8,5 кг
Габариты (длина-ширина-высота):	300 x 167 x 197 мм
Форма поставки: 1 шт., артикул 5555 0100	

## Принадлежности для Cerigo compact и Cerigo press:

### Карта памяти

Расширяет емкость памяти до 40 программ  
Форма поставки: 1 шт., артикул 5555 0201

### Программы обжига Duceragold®

18 программ для Duceragold  
Форма поставки: 1 шт., артикул 5555 0202

### Программы обжига Ducera,

низкотемпературные массы  
16 программ SYMBIOceram® и Duceram® LFC  
Форма поставки: 1 шт., артикул 5555 0203

### Программы обжига Ducera,

высокотемпературные массы  
23 программы Duceram Plus и Duceram MK  
Форма поставки: 1 шт., артикул 5555 0204

### Резиновые манжеты

Для муфелей под прессуемую керамику  
Форма поставки:  
1 шт., для муфеля 100 г, артикул 6590 1001  
1 шт., для муфеля 200 г, артикул 6590 1002

### Формирователь муфеля

Цоколь, 1 дистанционное кольцо для системы  
муфелей под прессуемую керамику  
Форма поставки:  
1 цоколь, 1 дистанционное кольцо для  
муфеля 100 г, артикул 6590 1101  
1 цоколь, 1 дистанционное кольцо для  
муфеля 200 г, артикул 6590 1102

### Трегер для обжига

Сотовый трегер из керамики  
Форма поставки: 1 шт., артикул 6590 1201

### Набор штифтов для обжига

Набор металлических штифтов для цельной керамики  
Форма поставки: 7 шт., артикул 6590 1202

### Вата для обжига

Трегерный материал для вкладок и накладок  
Форма поставки: 1 шт., артикул 6590 1203

### Пресс-штемпель

из оксида алюминия для Cerigo press  
Форма поставки: 1 шт., артикул 6590 2001

### Держатель пресс-штемпеля

из шамота  
Форма поставки: 1 шт., артикул 5556 0100